

Ischiální nerv

MD-ISCHIAL

SEKUNDÁRNÍ BODY

Anatomická lokalizace:

- A) Ve středu přední strany stehna, asi 20 cm nad horním okrajem pately
- B) Ve středu přední strany stehna, asi 15 cm nad horním okrajem pately

Typy MD injekcí:


MD-Neural + MD-Matrix

- C) Na laterální straně stehna v místě, kam pacient při vzpřímeném stoji dosáhne svým prostředníčkem

Typy MD injekcí:

MD-Neural + MD-Matrix

Způsob aplikace: s.c.

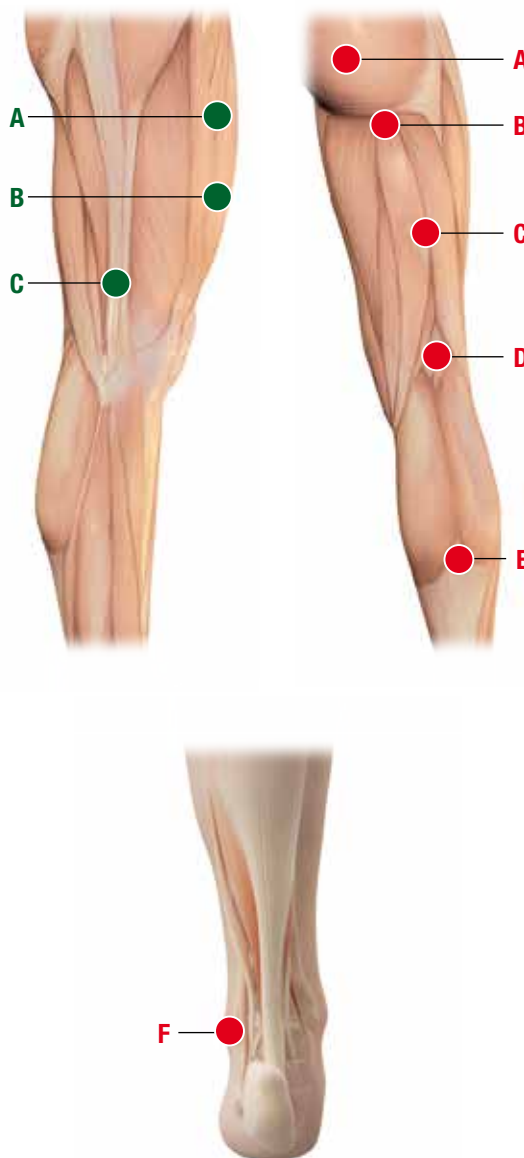

HLAVNÍ BODY

Anatomická lokalizace:

- A) Ve středu svalu gluteus maximus, 5–6 cm laterálně od zadní střední čáry
- B) Ve středu dolní gluteální rýhy (hranice mezi hýždí a zadní stranou stehna)
- C) Ve středu zadní strany stehna, v polovině mezi anatomickým umístěním B (viz výše) a anatomickým umístěním D (viz níže)
- D) Ve středu popliteální (podkolenní) rýhy.
- E) V místě zkřížení mezi dvěma hlavami svalu m. gastrocnemius a šlachou svalu m. soleus
- F) 3–4 cm od vrcholu zevního kotníku dorzodistálně.

Způsob aplikace:

A, B a C: i.m.

D: i.d.

E, F: s.c.


Poznámky:

Všechny subkutánní (s.c.) a intradermální (i.d.) aplikace by měly být provedeny jehlou délky 12–16 mm a průměru 25–28G (Gauge). Všechny intramuskulární (i.m.) aplikace by měly být provedeny jehlou délky 40 mm a průměru 21G (Gauge).

U subkutánních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 45°.

U intradermálních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 30°.

U intramuskulárních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 90°.

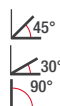

Nervus ischiadicus – MD-ISCHIAL

ZÁKLADNÍ INFORMACE K POUŽITÍ A KOMBINACE S DALŠÍMI MD PŘÍPRAVKY

Aplikace do hlavních bodů

- Ischialgie: MD-Ischial
- Lumboischialgie: MD-Ischial + MD-Lumbar + MD-Neural
- Lumbální neuralgie: MD-Ischial + MD-Muscle
- Přetrvávající pooperační ischialgie po operaci vyhrézlé ploténky L4-L5, L5-S1: MD-Ischial + MD-Neural
- Mortonova neuralgie (metatarsalgie): MD-Ischial + MD-Neural + MD-Tissue