

Koleno

MD-KNEE

SEKUNDÁRNÍ BODY

1

Anatomická lokalizace:



- A) 4–5 cm nad místem maxima konvexity česky (patella).
- B) Ve středu fossa poplitea.

Typy MD injekcí:

- A) MD-Muscle
- B) MD-Matrix

Způsob aplikace:

- A) i.m. do hloubky 6–8–10 mm, aplikovat v úhlu 90° k povrchu pokožky.
- B) s.c.

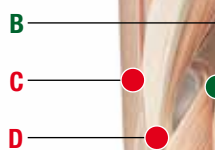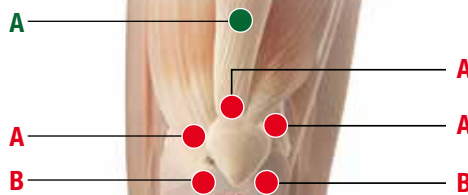

HLAVNÍ BODY

1

Anteriorní anatomická lokalizace:

- A) Horní okraj patelly a 2 cm tibiálně a fibulárně od tohoto místa při sledování zakřivené hrany česky.
- B) U dolního okraje patelly tibiálně a fibulárně od něho v úrovni kloubní štěrbiny kolenního kloubu.

Způsob aplikace:

s.c. nebo i.a. pouze v případě laterálního A.

2

Posteriorní anatomická lokalizace:

- C) Na vnitřní straně kolene ve výšce kloubní štěrbiny kolenního kloubu.
- D) Na vnitřní straně kolene na horním okraji horního zakončení tibie, distálně od kloubní štěrbiny.

Způsob aplikace:

s.c. do hloubky 5–6 mm, aplikovat v úhlu 90° k povrchu pokožky.

Poznámky:

Všechny subkutánní (s.c.) a intradermální (i.d.) aplikace by měly být provedeny jehlou délky 12–16 mm a průměru 25–28G (Gauge). Všechny intramuskulární (i.m.) aplikace by měly být provedeny jehlou délky 40 mm a průměru 21G (Gauge).

U subkutánních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 45°

U intramuskulárních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 90°

Tři nejfrekventovanější místa i.a. aplikace kolene jsou: anterolaterální, anteromediální (pacient má kolena pokrčená o 90°) a laterálně ve středu česky (při nataženém kolenu).

Jehla: délka 5 cm, 21G (Gauge) v průměru.



Koleno – MD-KNEE

ZÁKLADNÍ INFORMACE K POUŽITÍ A KOMBINACE S DALŠÍMI MD PŘÍPRAVKY

Aplikace do **hlavních bodů**

- Osteoartróza kolenního kloubu: MD-Knee + MD-Poly
- Bolest kolene z důvodu revmatoidní artritidy nebo jiných autoimunitních chorob: MD-Knee + MD-Poly
- Posttraumatická akutní a chronická artrosynovitida kolenního kloubu, osteoartrida nebo revmatoidní artritida: MD-Knee + MD-Poly
- Artrosynovitida, akutní a chronická posttraumatická nebo pooperační artrosynovitida: MD-Knee + MD-Matrix
- Traumatické léze zkřížených nebo kolaterálních vazů kolene: MD-Knee + MD-Tissue
- Léze menisku: MD-Knee + MD-Poly
- Příprava kolenního kloubu na menisektomii: MD-Knee + MD-Muscle
- Podpurná terapie po chirurgických zákrocích v oblasti kolene: MD-Knee + MD-Muscle + MD-Neural