

Kotník

MD-SMALL JOINTS, MD-POLY

● SEKUNDÁRNÍ BODY

1

Anatomická lokalizace:

- A) 2 cm pod a posteriorně k vnitřnímu kotníku (malleolus medialis) na horní hraně paty
- B) Na vnitřní hraně nártu, 2 cm anteriorně a inferiorně k vnitřnímu kotníku (malleolus medialis)
- C) Na hranici mezi os naviculare a os cuneiforme mediale.

Typy MD injekcí: MD-Tissue

Způsob aplikace:

5 mm, aplikovat v úhlu 90° k povrchu pokožky.

● Hlavní BODY

1

Anatomická lokalizace:

2 cm anteriorně a inferiorně k zevnímu kotníku (malleolus lateralis) na articulatio calcaneo-cuboidea.

Způsob aplikace:

Do hloubky 5–6 mm, aplikovat v úhlu 90° k povrchu pokožky.

2

Anatomická lokalizace:

Ve středu ohbí nártu, bezprostředně pod dolní konec tibie.

Způsob aplikace:

Do hloubky 5–6 mm, aplikovat v úhlu 90° k povrchu pokožky.


3

Anatomická lokalizace:

1 cm pod a lehce za zevním kotníkem (malleolus lateralis), bezprostředně nad patní kostí.

Způsob aplikace:

Do hloubky 5–6 mm, aplikovat v úhlu 90° k povrchu pokožky.

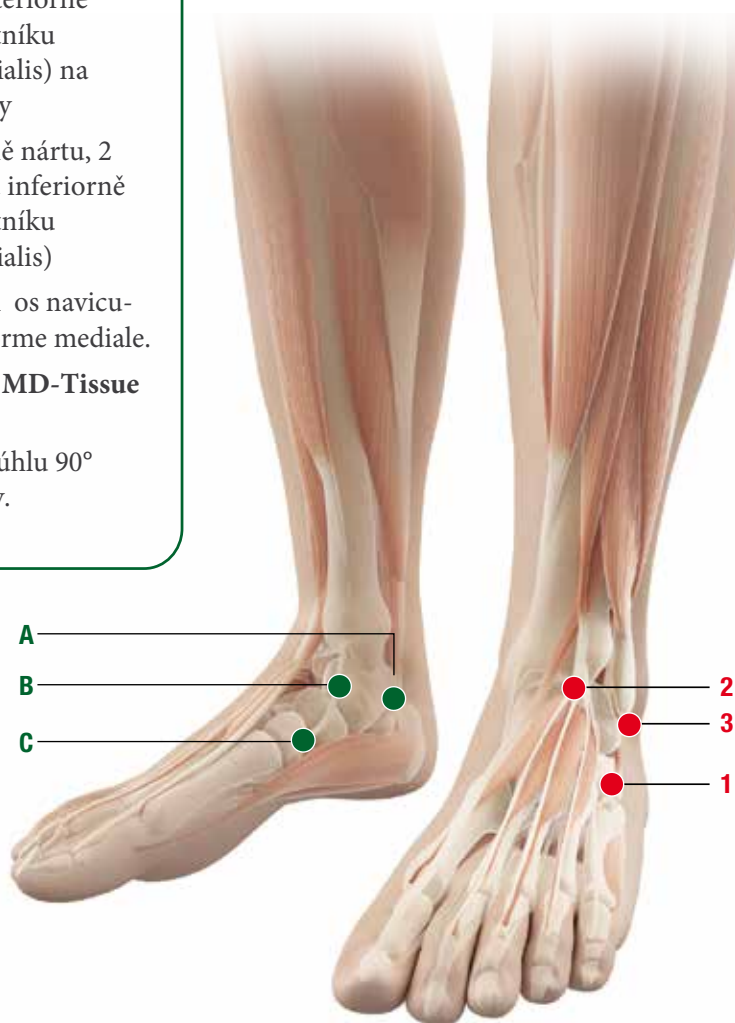

Poznámky:

Aplikace do hloubky 5 mm v úhlu 90° k povrchu pokožky (kolmo) jehlou délky 12–16 mm a průměru 25–28G (Gauge). 

Kotník – MD-SMALL JOINTS, MD-POLY

ZÁKLADNÍ INFORMACE K POUŽITÍ A KOMBINACE S DALŠÍMI MD PŘÍPRAVKY

Aplikace do hlavních bodů

- Artrotická bolest způsobená kladívkovými prsty: MD-Small Joints + MD-Poly
- Matatarzalgie: MD-Small Joints
- Matatarzalgie doprovázená Mertonovým neuromem: MD-Small Joints + MD-Poly + MD-Neural
- Revmatoidní artritida v oblasti nohy: MD-Small Joints + MD-Poly + MD-Matrix
- Tendinopatie nohy
- Tendinopatie Achillovy šlachy: MD-Small Joints, MD-Tissue