

Loket

MD-SHOULDER

SEKUNDÁRNÍ BODY

Epicondylitis lateralis

1

Anatomická lokalizace:
2–3 cm distálně od lokalizace
2. hlavního bodu.

Typy MD injekcí:
MD-Muscle

Způsob aplikace:
s.c. nebo i.m.
(do hloubky 5–6 mm).



Epicondylitis medialis

2

Anatomická lokalizace:
Ve středu loketního ohbí na
vnitřní straně šlachy bicepsu

Typy MD injekcí:
MD-Matrix + MD-Tissue

Způsob aplikace:
s.c. nebo i.d.

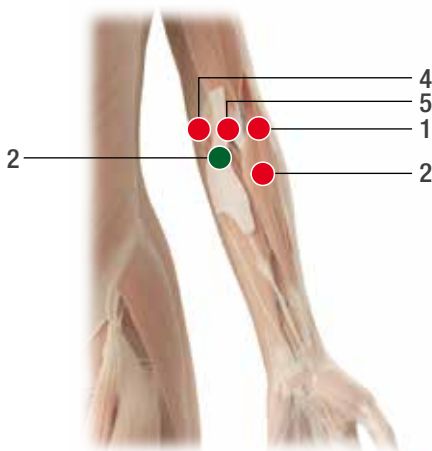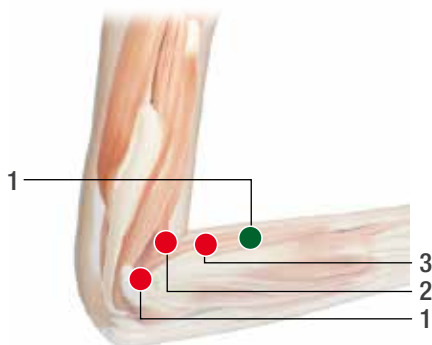

Poznámky:

Všechny subkutánní (s.c.) a intradermální (i.d.) aplikace by měly být provedeny jehlou délky 12–16 mm a průměru 25–28G (Gauge).

Všechny intramuskulární (i.m.) aplikace by měly být provedeny jehlou délky 40 mm a průměru 21G (Gauge).

Intraartikulární aplikace (i.a.) musí být provedena speciální jehlou určenou pro tento účel.

U subkutánních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 45°.



U intradermálních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 30°.



U intramuskulárních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 90°.



Loket – MD-SHOULDER

ZÁKLADNÍ INFORMACE K POUŽITÍ A KOMBINACE S DALŠÍMI MD PŘÍPRAVKY

- Epikondylitis lateralis *
- Epikondylitis medialis**
- De Quervainův syndrom (stenozující tenosynovitida): MD-Shoulder + MD-Neural

* (tzv. tenisový loket, epicondylitis lateralis humeri)

** (tzv. golfový loket, epicondylitis medialis humeri)

HLAVNÍ BODY

Epicondylitis lateralis

1

Anatomická lokalizace:
Při 90° flexi lokte přímo před epikondylem

Typy MD injekcí:
MD-Shoulder + MD-Matrix

Způsob aplikace:
s.c. při 90° sklonu jehly
k povrchu kosti

2

Anatomická lokalizace:
Při 90° flexi lokte na vrcholu laterálního epikondylu

Typy MD injekcí:
MD-Muscle

Způsob aplikace: s.c. nebo i.m.
(do hloubky 5–6 mm).

3

Anatomická lokalizace:
Při 90° flexi lokte přibližně 4 cm
před hlavním bodem 2

Typy MD injekcí:
MD-Muscle

Způsob aplikace: s.c. nebo i.m.
(do hloubky 5–6 mm).

Epicondylitis medialis

4

Anatomická lokalizace:
Při posteroanteriorním pohledu
na loket: mezi mediálním kondylem
humeru (trochleou) a olekranonem

Typy MD injekcí:
MD-Shoulder + MD-Matrix

Způsob aplikace:
s.c. při 45° sklonu jehly k povrchu
kosti. (v blízkosti místa aplikace se nachází n.ulnaris)

5

Anatomická lokalizace:
Na vnitřním vrcholu loketního ohbí při 90° flexi lokte.

Typy MD injekcí: MD-Muscle

Způsob aplikace: s.c. nebo i.m.
(do hloubky 4–5 mm).