

Zápěstí

MD-POLY, MD-SMALL JOINTS

● SEKUNDÁRNÍ BODY

1


Anatomická lokalizace:

Na vnější hraně radia proximálně 6–7 cm od místa ohybu zápěstí.

Typy MD injekcí:

MD-Poly + MD-Neural

Způsob aplikace: s.c.

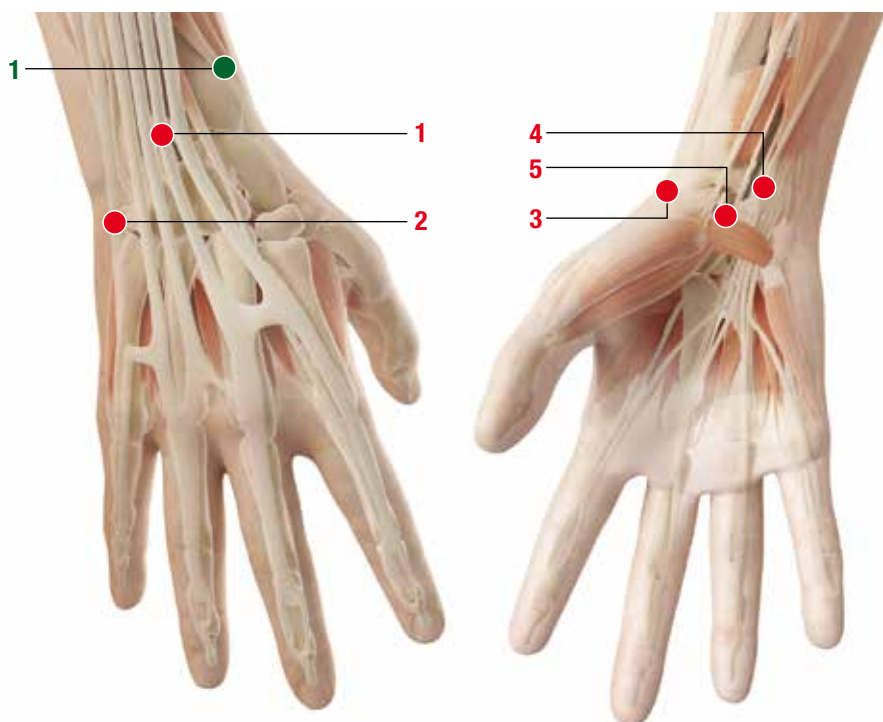

Poznámky:

Všechny subkutánní (s.c.) a intradermální (i.d.) aplikace by měly být provedeny jehlou délky 12–16 mm a průměru 25–28G (Gauge).

U subkutánních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 45°.



U intradermálních aplikací vedte jehlu přibližně pod úhlem 30°.



● HLAVNÍ BODY

1

Anatomická lokalizace:

Na dorzální straně předloktí, zhruba 2 cm nad dorzálním ohybem zápěstí na vnitřní straně radia (ruka je v supinační poloze).

Způsob aplikace: s.c. nebo i.d.

2

Anatomická lokalizace:

Na vnitřní hraně ruky do prohlubniny mezi 5. kostí metakarpální a kostí hákovou (os hamatum).

Způsob aplikace: s.c.

3

Anatomická lokalizace:

Ve fossa radialis, na ohybu zápěstí. Na zevní hraně ruky v prohlubnině nad hlavou 1. metakarpální kosti.

Způsob aplikace: i.d., (v blízkosti místa aplikace se nachází n. radialis)

4

Anatomická lokalizace:

2 cm nad ohybem zápěstí mezi kostí hráškovou (os pisiforme) a styloidním výběžkem kosti loketní (ulna).

Způsob aplikace: s.c., (v blízkosti místa aplikace se nachází n. ulnaris)

5

Anatomická lokalizace:

Uprostřed ohybu zápěstí.

Způsob aplikace: s.c.

Zápěstí – MD-POLY, MD-SMALL JOINTS

ZÁKLADNÍ INFORMACE K POUŽITÍ A KOMBINACE S DALŠÍMI MD PŘÍPRAVKY

Aplikace do hlavních bodů

- Artritida prstů ruky (lokálně bolestivé body): MD-Small Joints
- Rhizartróza palce (Forestierova choroba): MD-Small Joints + MD-Poly + MD-Neural
- Syndrom karpálního tunelu: MD-Small Joints + MD-Neural
- De Quervainova choroba (viz též Loket – základní informace k využití a kombinace s dalšími MD přípravky): MD-Small Joints + MD-Neural
- Revmatoidní artritida ruky: MD-Small Joints + MD-Matrix
- Tendinopatie ruky z důvodu dlouhé imobilizace: MD-Small Joints + MD-Matrix + MD-Tissue